


[Bioplug]

**Obturateur fémoral souple
résorbable**

**Flexible resorbable cement
restrictor**

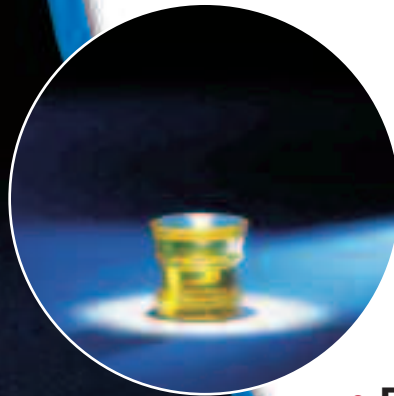

- **Géométrie adaptée**
Suitable geometry
- **Positionnement optimisé**
Optimal positioning
- **Excellente stabilité**
Excellent stability



INDICATIONS

Bioplug est un obturateur fémoral résorbable destiné à délimiter la zone de travail, à stopper la progression du ciment et à assurer sa mise sous pression lors de la mise en place de l'implant.

INDICATIONS

Bioplug is a resorbable, femoral cement restrictor designed to delimit the working area, to stop acrylic cement progression and to facilitate its insertion under pressure during implant introduction.

● [Utilisation-Performances]

- Sa souplesse permet une bonne adaptation au contour du canal médullaire assurant ainsi une parfaite étanchéité
- Sa forme cylindro-conique assure à la fois le guidage lors de l'introduction et une excellente stabilité en position finale
- Les étalons fraiseurs facilitent le choix de la profondeur de pose et l'adéquation de la taille de l'obturateur au fût fémoral
- L'obturateur Bioplug se résorbe à 80 % en 3 heures et totalement en quelques jours



- Its flexibility enables a good adaptation to medullar shaft outlines for a perfect tightness
- Its cylindrical, conical shape enables both the guiding during introduction and a perfect stability once the plug is introduced
- Reaming dummy olives facilitate the positioning of the plug at the right depth and the appropriateness of the plug size to the femoral shaft
- Bioplug is being resorbed at 80 % within 3 hours; total resorbtion is observed within a few days

● [Composition]

- Gélatine porcine de haute pureté conforme à la pharmacopée européenne
- Glycérol
- Eau
- Hydroxybenzoate de méthyle

- Highly pure pig gelatin, in compliance with the European Pharmacopea
- Glycerol
- Water
- Methylparahydroxybenzoate

● [Présentation - Stockage]

- Conditionné à l'unité sous double blister stérile.
- 6 tailles : 8-10-12-14-16-18
- Date de péremption : date de fabrication + 5 ans
- A conserver à une température < 30 °C



- Sterile double blister
- 6 sizes : 8-10-12-14-16-18
- Expiry date : manufacturing date + 5 years
- To be stored in a cool place, under 30°C

● [Références]

Taille / Size	8	10	12	14	16	18
Obturateur / Plug	H11A08	H11A10	H11A12	H11A14	H11A16	H11A18
Porte obturateur / Plug holder	A140	A150				
Étalon fraiseur / Reaming gauge	A108	A110	A112	A114	A116	A118
Ancillaire complet avec boîte / Complete instrumentation with box	A300					



Votre distributeur / your distributor

Fabricant / Manufacturer : MedicalBiomat - 69120 Vaulx en Velin